



Руководство по сборке и эксплуатации

Orlauf Light foot

Массажер для ног

Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Распаковка	8
4. Устройство массажера	9
5. Управление и функции массажера	10
6. Подготовка к эксплуатации	12
7. Устранение неисправностей	13
8. Использование и утилизация массажера	15
9. Спецификация	16

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного массажера. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Чтобы избежать риска травм, перегрева устройства или повреждения его компонентов, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- всегда отключайте массажер от электросети сразу после использования и перед очисткой;
- не используйте устройство в ванной, под душем или рядом с раковиной — массажер не является водонепроницаемым;
- не дотрагивайтесь до устройства, упавшего в воду; немедленно отключите его;
- не допускайте падения предметов на массажер;
- убедитесь, что во время массажа на вас или массажере нет булавок или других металлических аксессуаров или фурнитуры;
- тщательно проверяйте поверхность массажера перед каждым использованием; не используйте прибор, если на нем есть какие-либо признаки порчи, например, трещины или вздутия;
- храните в сухом месте, не используйте во влажной среде;
- не трогайте шнур питания мокрыми руками при подключении или отключении от электрической розетки;
- следите, чтобы шнур питания не защемлялся и на него не наступали, особенно около вилки и в месте крепления к устройству;
- держите шнур подальше от нагретых поверхностей;
- при хранении свободно оборачивайте шнур питания вокруг

устройства;

- если шнур питания или вилка устройства повреждены, не пытайтесь починить их самостоятельно;
- отключайте массажер от электросети во время грозы;
- не накрывайте устройство во время его работы;
- не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.



1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для лечения или профессионального применения.
- Используйте массажер только так, как указано в инструкции, и не применяйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
- Устройство предназначено исключительно для взрослых пользователей. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать массажер только под присмотром.
- Перед первым использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, кардиостимуляторов или металлических имплантатов.
- Не используйте массажер при плохом самочувствии, высокой температуре, воспалениях, варикозном расширении вен, тромбозе, онкологических заболеваниях, кожных высыпаниях, повреждениях кожи, во время беременности, а также при других противопоказаниях.
- Если во время массажа вы почувствуете боль, дискомфорт или онемение — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

- Не используйте массажер одновременно с другими устройствами для прогрева, например, электрическим одеялом.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не роняйте массажер и не используйте его при механических повреждениях.
- Не используйте массажер дольше 20 минут без перерыва. Между сеансами рекомендуется делать паузу не менее 10–15 минут для предотвращения перегрева устройства.

1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Храните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур — это может повредить корпус и внутренние компоненты.
- Используйте массажер только в помещении.
- Избегайте ударов, падений и чрезмерного давления на устройство.
- Чрезмерное или непрерывное использование может привести к перегреву и сократить срок службы массажера. При перегреве остановите сеанс и дайте устройству полностью остыть перед повторным включением.
- После использования вытирайте пыль и грязь с массажера сухой мягкой тканью.
- Тканевую вставку для ног можно снять. Для нее подходит только ручная стирка. Не стирайте и не отжимайте ее в стиральной машине, также не сушите в сушильной машине.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1 — Комплектация массажера

Описание	Кол-во
Массажер для ног	1 шт.
Кабель питания с адаптером	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

3. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Когда массажер не используется, храните его в коробке, чтобы предотвратить повреждения и сохранить комплектность устройства.

4. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Секция для ног с моющейся тканью.
2. Консоль управления.
3. Корпус.
4. Ножки.
5. Кабель питания с адаптером.

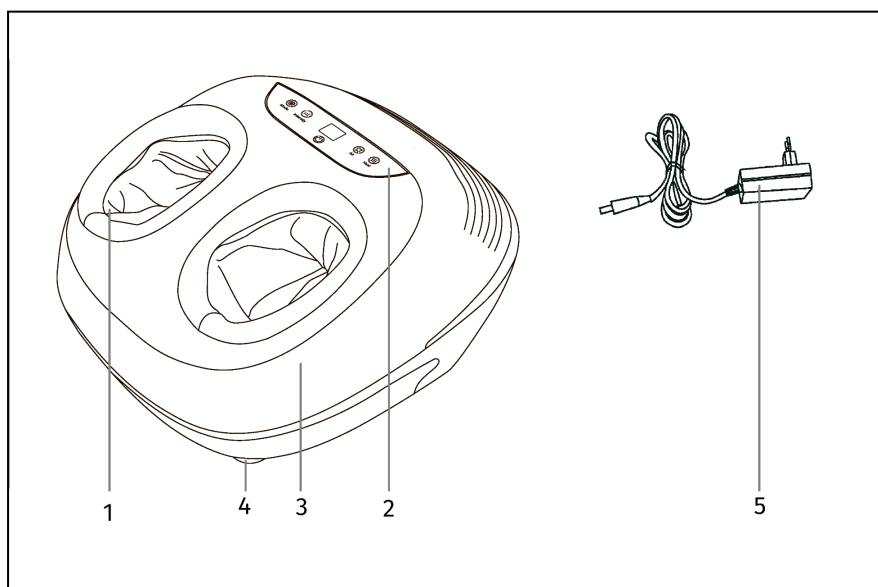


Рисунок 1 — Устройство массажера

5. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

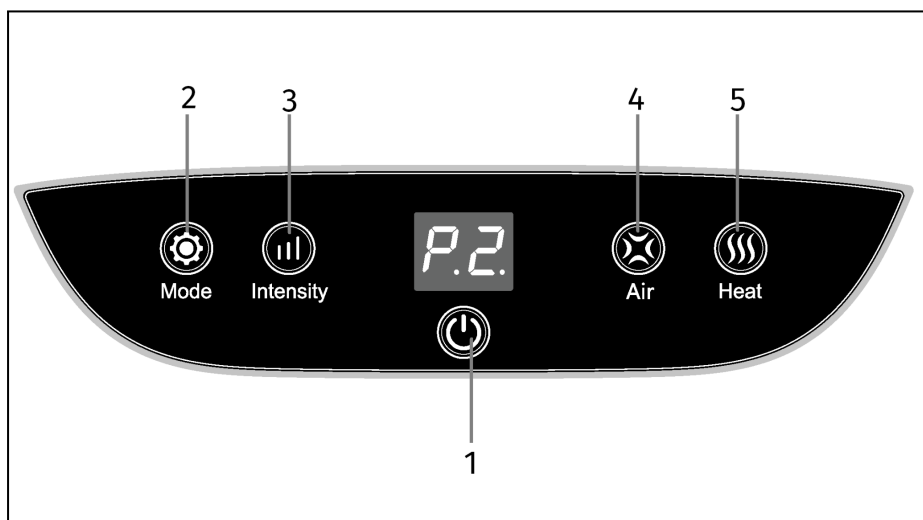


Рисунок 2 — Панель управления

1. Power (Вкл/Выкл). Кнопка включения и выключения массажера. Нажмите и удерживайте кнопку для включения массажера. После включения загорится индикатор обратного отсчета (20 минут). Массаж начнется в Режиме 1 (P1) с мощностью воздушно-компрессионных подушек 1 (L1) и мощностью роликового массажа стоп 1 (b1). Продолжительное нажатие на кнопку выключит массажер.

2. Mode (Режим). Кнопка запускает одну из трех автоматических программ. Выбранная программа будет отражена на экране как P1, P2, P3 в течение 2 секунд после активации. Далее на экране будет отображаться обратный отсчет времени выполнения программы.

- P1 (программа «Обновление»). Массаж с упором на проминание стоп и мягкое давление в области лодыжек и подъема стопы.
- P2 (программа «Расслабление»). Упор на воздушно-компрессионный

массаж пяток, подъем стопы и лодыжек. Роликовый массаж работает в прерывистом режиме (с паузами).

- РЗ (программа «Здоровье»). Упор делается на глубокий и интенсивный роликовый массаж стоп, воздушно-компрессионный массаж выполняет вспомогательную функцию.

3. Intensity (Интенсивность). Кнопка управления мощностью роликового массажа. Каждое нажатие на кнопку переключает мощность следующей последовательности:

- b1 — слабая мощность;
- b2 — средняя мощность;
- b3 — высокая мощность;
- b0 — роликовый массаж отключен.

4. Air (Воздушно-компрессионный массаж). Кнопка управления мощностью воздушно-компрессионного массажа. Каждое нажатие на кнопку переключает мощность в следующей последовательности:

- L1 — слабая мощность;
- L2 — средняя мощность;
- L3 — высокая мощность;
- L0 — лимфодренажный массаж отключен.

5. Heating (Прогрев). Кнопка управления функцией прогрева. Нажмите для включения прогрева, повторное нажатие отключит прогрев.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Разместите массажер на полу.
- Соедините кабель питания с адаптером. Раздастся характерный щелчок.
- Вставьте вилку адаптера в розетку (AC 220В, 50 Гц).
- Нажмите на кнопку **Power** для включения устройства.

7. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 2 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не реагирует на нажатия кнопок.	1. Кабель питания не подключен.	1. Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети.
	2. Не нажата кнопка питания.	2. Нажмите кнопку включения.
Массажер сильно нагрелся.	Массажер непрерывно работал длительное время.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего вы сможете использовать его снова.
Звук.	Шум роликов, воздушно-компрессионных подушек и моторов во время работы является нормальным явлением.	

Массажер внезапно перестал работать в процессе массажа.	1. Отсутствует питание. 2. Было выполнено несколько циклов по 20 минут. 3. Массажер только что завершил работу (прошло 20 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился. 4. На массажер было оказано сильное давление.	1. Проверьте подключение кабеля питания к адаптеру и подключение адаптера к электросети. 2. Дайте прибору остыть в течение 30 минут. Нажмите кнопку включения. 3. Дайте прибору остыть в течение 20 минут. Нажмите кнопку включения. 4. Попробуйте расслабить стопы и избегайте чрезмерного давления на массажер.
--	---	---

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ МАССАЖЕРА

Изделие содержит электронные компоненты. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства вашего региона в области обращения с отходами производства и потребления. Для получения информации о правилах утилизации крупногабаритного и электронного оборудования в вашем населенном пункте обратитесь в местную администрацию или управляющую компанию.

Срок службы	24 месяца
Срок хранения	48 месяцев



Примечание! Сроки службы и хранения, установленные в инструкции, действуют только при условии соблюдения пользователем всех требований по обращению и хранению, изложенных в ней.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виды массажа	лимфодренажный, аэромассаж, расслабляющий, роликовый, разминание
Механизм массажа	роликовый, airbag
Автопрограммы, шт.	3
Кол-во роликов, шт.	роликовый массажный механизм на платформе и отдельные массажные барабаны
Кол-во воздушных подушек, шт.	12
Прогрев	да
Таймер	20 минут
Размер (ДхШхВ), см	40х36х23
Вес нетто, кг	3,5
Вес брутто, кг	5
Размер упаковки, см	44х42х27
Напряжение питания	220В/12В 3А
Мощность, Вт	36

Поставщик/Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабировская ул., дом 54, литера А, помещение 035С ИНН: 7805768366 ОГРН: 1207800096888 www.demo-sport.ru/ sales@demo-sport.ru тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	SHENZHEN FORREST HEALTH TECHNOLOGY CO., LTD 201, Building 1, No.30, QinFu Road, LiuYue South Community, HengGang Street, LongGang District, Shenzhen, China +86-755-25185955
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orldaif.com

Сайт производителя <https://orldaif.com/>.



ORLAUF

