



Руководство по сборке и эксплуатации

Orlauf Relief

Универсальный массажер

ORLAUF

WELLNESS



СОЦСЕТИ

Узнавайте первыми
о новинках и акциях



ОФФЛАЙН МАГАЗИНЫ

Протестируйте
перед покупкой
и получите экспертную
консультацию



СЕРВИС

Получите оперативную
сервисную поддержку
и ответы на вопросы

Пн-Пт:

10:00 — 18:00 (GMT+3)

📞 8 (999) 063-51-40

📞 8 (800) 707-24-88

ORLAUF.COM



**Актуальные
инструкции**



Сервисная поддержка



Актуальная инструкция



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	5
1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора	5
1.2 Правила использования массажера	6
1.3 Правила хранения и эксплуатации	7
2. Комплектация	8
3. Распаковка	8
4. Устройство массажера	9
5. Управление и функции массажера	10
5.1 Кнопки управления	10
6. Световая индикация	11
7. Варианты использования массажера	12
8. Зарядка массажера	13
9. Правила эксплуатации аккумулятора	14
10. Устранения неисправностей	15
11. Использование и утилизация массажера	16
12. Спецификация	17

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы купили массажер, который сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя его, вы сможете улучшить свое самочувствие и снять накопившееся напряжение.

Прежде чем приступить к эксплуатации массажера, внимательно изучите настоящее руководство, чтобы ознакомиться с его техническими и функциональными особенностями. Обязательно сохраняйте данную инструкцию, чтобы всегда иметь под рукой перечень всех функций и правила эксплуатации. Обращаем внимание на обязательное соблюдение правил безопасности при использовании массажера.

Если у вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого вы приобрели массажер.



Внимательно прочитайте всю инструкцию перед использованием данного массажера. Сохраняйте ее для дальнейшего использования.

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.1 Правила безопасности при использовании электроприбора

Чтобы избежать риска травм, перегрева устройства или повреждения его компонентов, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- используйте массажер только по назначению, как указано в этом руководстве;
- не используйте устройство в ванной, под душем или рядом с раковиной — массажер не является водонепроницаемым;
- не допускайте попадания влаги на корпус массажера, разъемы и кабель для зарядки;
- следите, чтобы во время зарядки массажера шнур для зарядки не перегибался, не перекручивался, не находился под натяжением и не прижимался посторонними предметами;
- не прикасайтесь к кабелю для зарядки мокрыми руками;
- держите шнур для зарядки подальше от нагретых поверхностей;
- для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство из комплекта;
- не подключайте устройство к поврежденному источнику для зарядки;
- не накрывайте массажер во время работы и не используйте его под подушками или одеялами — это может привести к перегреву;
- перед каждым использованием осматривайте корпус массажера; не используйте устройство при наличии видимых повреждений, таких как трещины или вздутия;

- не допускайте падения предметов на массажер и проливания жидкости;
- убедитесь, что на устройстве или вашей одежде нет булавок, металлических застёжек и других посторонних предметов;
- не разбирайте массажер и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, при неисправности обратитесь в сервисный центр;
- храните массажер в недоступном для детей месте.



1.2 Правила использования массажера

- Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для лечения или профессионального применения.
- Используйте массажер только так, как указано в инструкции, и не применяйте дополнительные аксессуары, не одобренные производителем.
- Устройство предназначено исключительно для взрослых пользователей. Дети и лица с ограниченными возможностями могут использовать массажер только под присмотром.
- Перед первым использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, кардиостимуляторов или металлических имплантатов.
- Не используйте массажер при плохом самочувствии, высокой температуре, воспалениях, варикозном расширении вен, тромбозе, онкологических заболеваниях, кожных высыпаниях, повреждениях кожи, во время беременности, а также при других противопоказаниях.
- Если во время массажа вы почувствуете боль, дискомфорт или онемение — немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.

- Не используйте массажер одновременно с другими устройствами для прогрева, например, электрическим одеялом.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажера.
- Не роняйте массажер и не используйте его при механических повреждениях.
- Не используйте массажер дольше 20 минут без перерыва. Между сеансами рекомендуется делать паузу не менее 10–15 минут для предотвращения перегрева устройства.



1.3 Правила хранения и эксплуатации

- Храните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, влаги и пыли.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур — это может повредить корпус и внутренние компоненты.
- Используйте массажер только в помещении.
- Избегайте ударов, падений и чрезмерного давления на устройство.
- Чрезмерное или непрерывное использование может привести к перегреву и сократить срок службы массажера. При перегреве остановите сеанс и дайте устройству полностью остыть перед повторным включением.
- Тканевый чехол съемный. Для него подходит только ручная стирка: не стирайте и не отжимайте в стиральной машине, также не сушите в сушильной машине.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 1 — Комплектация массажера

Описание	Кол-во
Массажер	1 шт.
Зарядный кабель Type-C	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

3. РАСПАКОВКА

- Откройте крышку коробки и убедитесь, что все комплектующие на месте.
- Достаньте массажер из коробки.
- Перед первым использованием полностью зарядите массажер согласно инструкции из раздела «Зарядка устройства».
- Когда массажер не используется, вы можете хранить его в коробке.

4. УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1. Панель управления.
2. Массажные манипуляторы.
3. Регулируемый ремень.
4. Световой индикатор
5. Кнопка питания.
6. Кнопка выбора режима.
7. Кнопка прогрева.
8. Кнопка регулировки интенсивности.
9. Зарядный кабель Type-C.

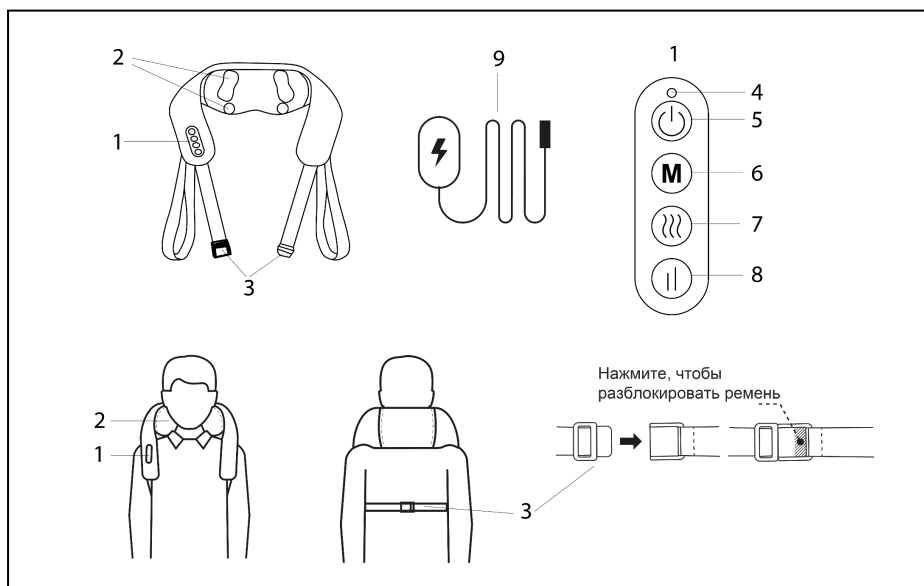


Рисунок 1 — Устройство массажера

5. УПРАВЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

5.1 Кнопки управления



Для включения/выключения массажера нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд.

Режим

Кнопка переключения режимов работы массажных манипуляторов.



Режим 1 — манипуляторы вращаются по часовой стрелке и против часовой стрелки с интервалом в 1 минуту.


Режим 2 — манипуляторы вращаются по часовой стрелке.

Режим 3 — манипуляторы вращаются против часовой стрелки.



Прогрев

Включение и отключение прогрева. По умолчанию прогрев включен.

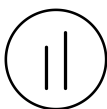

Интенсивность

Регулировка интенсивности работы массажных манипуляторов. Переключение между низким и высоким уровнем. По умолчанию включен низкий уровень интенсивности.

6. СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ

- Красный индикатор горит непрерывно во время работы массажера.
- Красный индикатор мигает во время зарядки.
- Зеленый индикатор загорается, когда устройство полностью заряжено.



Внимание! При низком уровне заряда (напряжении 6,5 В) массажер автоматически отключается.

7. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖЕРА

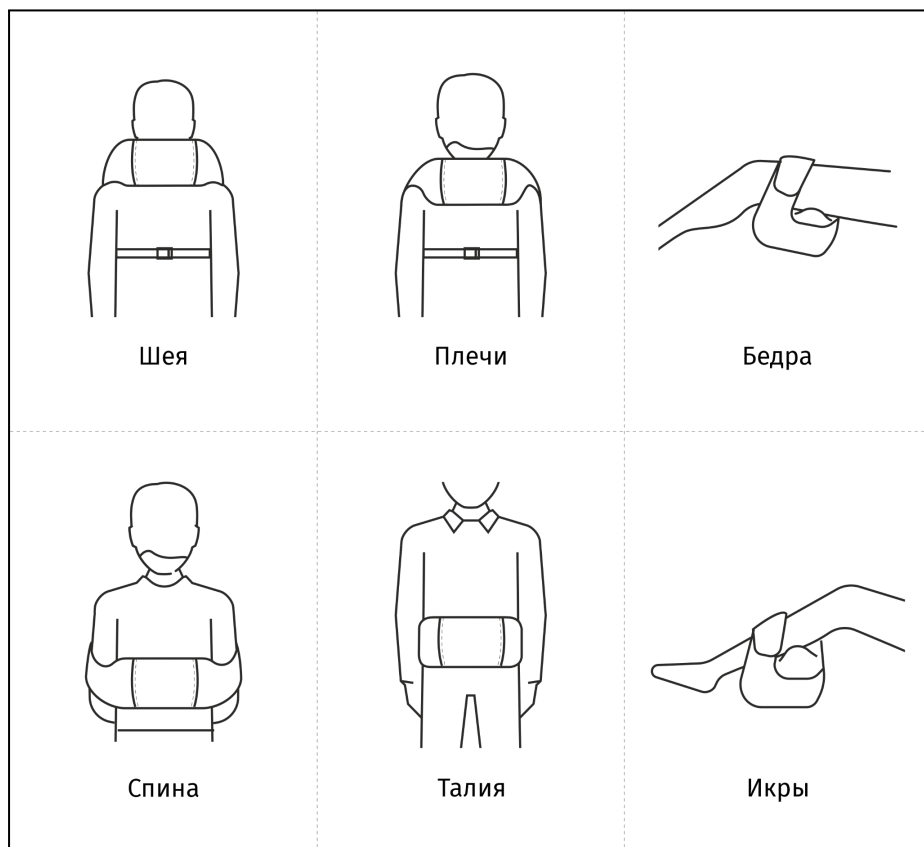


Рисунок 2 — Варианты использования массажера



Примечание! Время работы по умолчанию составляет 15 минут.

8. ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА

Перед первым использованием полностью зарядите массажер.

- Подключите зарядку типа Type-C из комплекта.
- Светодиодный индикатор зарядки загорится красным.
- Светодиодный индикатор зарядки станет зеленым, когда массажер будет полностью заряжен.
- Приблизительное время зарядки составляет 3,5-4 часа.

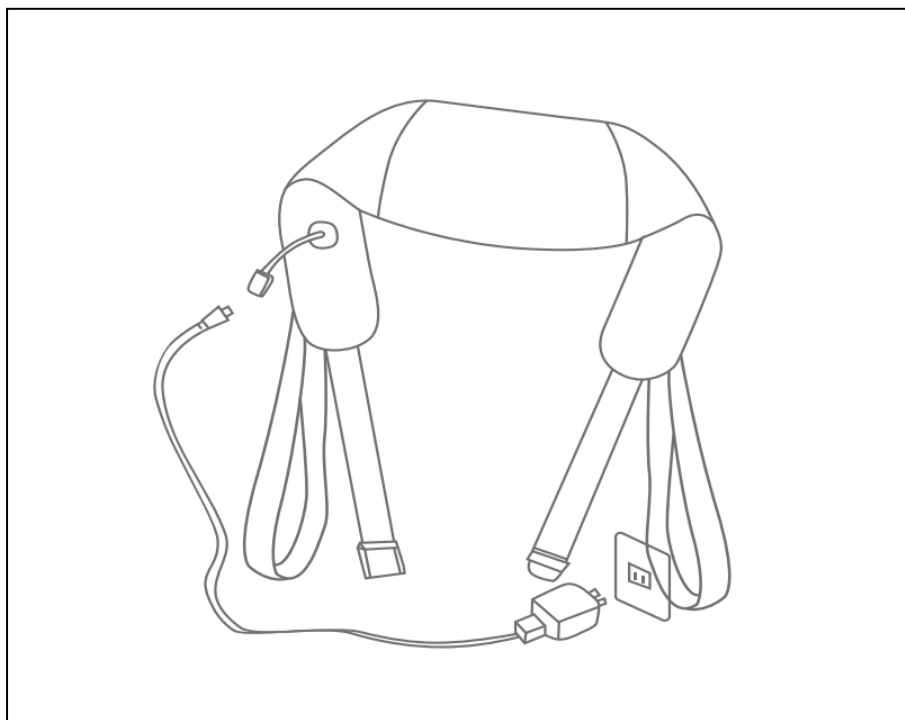


Рисунок 3 — Зарядка массажера

9. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА

Массажер содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо переработать или утилизировать надлежащим образом. Обратитесь в местное управление по утилизации отходов для получения информации о переработке или утилизации аккумулятора.

Обращение с аккумуляторами:

- при контакте с жидкостью из элемента аккумулятора промойте пораженные участки водой и обратитесь за медицинской помощью;
- никогда не бросайте аккумулятор в огонь - это может привести к взрыву;
- не разбирайте, не вскрывайте и не повреждайте аккумулятор;
- для зарядки используйте только оригинальное зарядное устройство из комплекта;
- перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор;
- всегда следите за тем, чтобы зарядка проходила правильно и безопасно.

10. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Раздел о наиболее распространенных проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации. Если рекомендации не помогли, свяжитесь с сервисным центром или его представителем.

Таблица 2 — Возможные неисправности и способы их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Массажер не работает.	1. Низкий уровень заряда устройства. 2. Массажер только что завершил работу (прошло 10 минут с момента начала массажа) и автоматически отключился. 3. Массажер перегружен. Такое может случиться, если на него встать или положить тяжелый предмет.	1. Зарядите устройство. 2. Дайте прибору остыть в течение 20 минут. Нажмите кнопку включения. 3. Выключите массажер. Уберите нагрузку и нажмите кнопку включения.
Массажер перегревается.	1. Было выполнено несколько циклов массажа по 10 минут. 2. Слишком долго работает функция прогрева.	Дайте прибору остыть в течение 30 минут. Нажмите кнопку включения.

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ МАССАЖЕРА

Изделие содержит электронные компоненты. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями законодательства вашего региона в области обращения с отходами производства и потребления. Для получения информации о правилах утилизации крупногабаритного и электронного оборудования в вашем населенном пункте обратитесь в местную администрацию или управляющую компанию.

Срок службы	24 месяца
Срок хранения	48 месяцев



Примечание! Сроки службы и хранения, установленные в инструкции, действуют только при условии соблюдения пользователем всех требований по обращению и хранению, изложенных в ней.

12. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Виды массажа	расслабляющий, разминание
Механизм массажа	роликовый
Автопрограммы, шт.	3
Кол-во роликов, шт.	2 пары манипуляторов с имитацией захвата руками
Прогрев	да
Таймер	10 минут
Размер в рабочем виде (ДхШхВ), см	30х18х15
Вес нетто, кг	1,5
Вес брутто, кг	2
Размер упаковки (ДхШхВ), см	25х17х17
Напряжение питания	220В/5В 2А
Мощность, Вт	10
Батарея, мАч	1800

Импортер	ООО «ДЕМО-СПОРТ» 197183, Санкт-Петербург г., Полевая Сабиловская ул., дом 54, литера А, помещение 035С тел. 8-800-775-56-38
Завод-изготовитель	Fuan Lianhe Health Technology Co., LTD Building 1, No.318 Century Avenue, Fuan, Fujian, China Tel: +86 199 5933 3557
Страна изготовления	КНР
Дата изготовления	Указана на этикетке
Гарантия	12 месяцев

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию массажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. В случае возникновения любых неисправностей просим не пытаться устранить проблему самостоятельно, обращайтесь в сервисный центр ООО «ДЕМО-СПОРТ» по телефону 8-800-775-56-38, либо на официальном сайте www.orlauf.com

Сайт производителя <https://orlauf.com/>.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There is no handwriting or other markings on the paper.

ORLAUF

